

Informasjon til deg som skal bruke Tezspire (tezepelumab) ferdigfylt penn



Interessert i mer detaljert veiledning –
Les pakningsvedlegg på www.felleskatalogen.no


Hva trenger du å forberede?



Ta pennen ut av kjøleskapet.
La Tezspire ligge i romtemperatur mellom 20 °C og 25 °C i ca. 60 minutter eller lenger (opp til maksimalt 30 dager) før injeksjonen settes.

Anbefalt injeksjonssted er foran på låret eller nedre del av magen.

Pennen skal ikke injiseres i et område mindre enn 5 cm fra navlen, i hud som er øm, har blåmerker, flasser er hard eller i arr eller skadet hud. Eller gjennom klær.

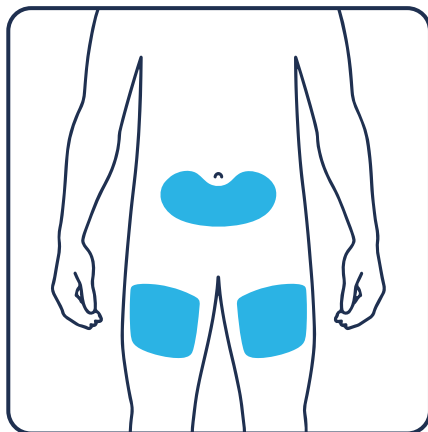


En omsorgsperson kan injisere i overarmen, låret eller magen.

Rens injeksjonsstedet grundig med en alkoholserviett, etter grundig håndvask.


Hvordan injiserer du?

Følg helsepersonellens instruksjoner når du skal sette injeksjonen. Du kan enten klemme huden på injeksjonsstedet forsiktig sammen eller sette injeksjonen uten å klemme sammen huden.


Injisér ved å følge trinnene i figurene a, b, c og d.

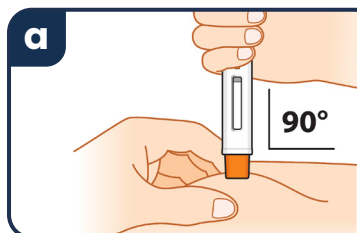


Plasser den ferdigfylte pennen. Plasser den oransje nålebeskytteren flatt mot huden (90 graders vinkel). Sørg for at du kan se visningsvinduet.

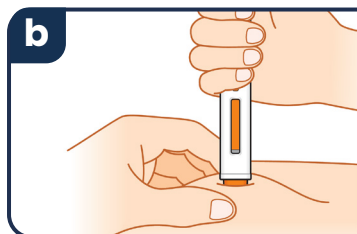

Press pennen bestemt ned til du ikke kan se den oransje nålebeskytteren. Du hører det første 'klikket', som forteller deg at injeksjonen har startet. Det oransje stemplet beveger seg nedover i visningsvinduet under injeksjonen.

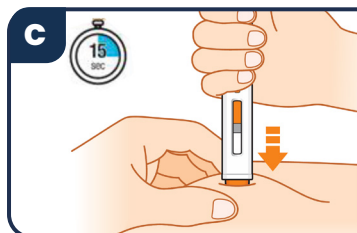

Hold pennen bestemt nede i ca. 15 sekunder. Du hører et andre 'klikk', som forteller deg at injeksjonen er ferdig. Det oransje stemplet fyller da visningsvinduet.

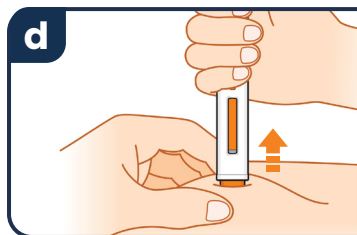

Når du har satt injeksjonen, løfter du den ferdigfylte pennen rett opp. Den oransje nålebeskytteren glir ned og låses på plass over nålen.

Hvordan oppbevarer du?



Oppbevaring i kjøleskap mellom 2 – 8 °C i den ytre pakningen til den skal brukes.



Oppbevaring i romtemperatur mellom 20–25 °C i pakningen maksimalt 30 dager.



Penner som er oppbevart i romtemperatur i mer enn 30 dager skal kastes.

Kast den ferdigfylte pennen på sikker måte.

Hver ferdigfylte penn inneholder en enkelt dose Tezspire og kan ikke brukes igjen. Sett ikke hetten tilbake på pennen.

Kast den brukte pennen og hetten i en sikker beholder for skarpt avfall. Annet brukt utstyr kan kastes i husholdningsavfallet. Du skal ikke kaste den ferdigfylte pennen i husholdningsavfallet.